


KaVo QUATTROcare PLUS

Una buona manutenzione conviene sempre.

La risposta più conveniente per la manutenzione
che preservi a lungo il valore degli strumenti.

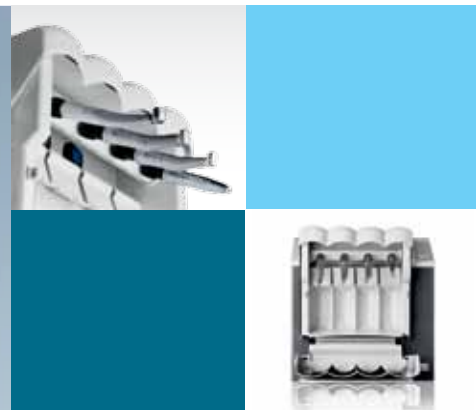

KaVo. Dental Excellence.

Manutenzione quattro volte perfetta. Veloce e confortevole.

Così facile da utilizzare.

Nella prassi quotidiana rimane poco tempo a disposizione per la manutenzione degli strumenti. Questa regola vale in genere per tutto lo staff dello studio. È quindi molto importante poter disporre di un sistema di pulizia e manutenzione sofisticato ma che possa essere utilizzato da tutti velocemente ed in modo intuitivo. Inserire gli strumenti. Chiudere lo sportello. Avviare. Quattro in una volta. In un batter d'occhio - ecco fatto.

Quattro strumenti in un minuto.

Soltanto con la pressione di un tasto. Semplicemente in modo automatico. KaVo QUATTROcare PLUS offre massima rapidità e facilità d'utilizzo. KaVo QUATTROcare PLUS convince per la sua estrema semplicità. Basta inserire sugli appositi attacchi fino a quattro strumenti, chiudere lo sportello frontale ed avviare il programma di manutenzione. Il ciclo completo di lavoro per quattro strumenti richiede solo 1 minuto. Dopodiché la QUATTROcare PLUS è di nuovo disponibile per il prossimo ciclo di manutenzione.

È così semplice.

Manutenzione di ottima qualità, fino a quattro strumenti
La procedura da eseguire con KaVo QUATTROcare PLUS.

- 1 Inserire i manipoli. Per effettuare tale operazione sono disponibili di serie un attacco rapido MULTIflex e tre attacchi INTRAmatic.
- 2 Chiudere lo sportello anteriore. A questo punto l'apparecchio è già pronto all'uso.
- 3 Premere il pulsante Start. La pulizia interna e la lubrificazione del tutto automatiche fino a quattro strumenti richiedono solo 1 minuto.
- 4 Finito! Estrarre gli strumenti.



SOLO 1
MIN!

Gestione e sequenza delle fasi operative. Punti di forza e vantaggi per voi:

- Nessun errore manuale, grazie ad una interfaccia semplice e sicura
- Sicurezza della manutenzione, grazie allo svolgimento automatico del programma
- Disponibilità degli strumenti già dopo un minuto, grazie ai tempi del ciclo breve

KaVo QUATTROcare PLUS:
semplice - veloce - confortevole.



Manutenzione ottimale.

La differenza, come sempre, è nei dettagli.

La rapida espansione della schiuma pulente presente all'interno dello spray QUATTROcare PLUS elimina tutti i residui inorganici all'interno dello strumento e l'aria compressa li spinge all'esterno, creando quindi i presupposti ottimali per una perfetta manutenzione.

Sebbene non indispensabile, si consiglia di effettuare una detersione preventiva con KaVo CLEAN e KaVo DRY, al fine di rimuovere con la massima certezza i residui proteici situati all'interno della strumentazione. La rapidità di KaVo QUATTROcare PLUS non solo rende più snella l'attività dello studio, ma garantisce anche la sicurezza di una manutenzione di assoluta qualità. Come conseguenza si otterrà una maggiore durata degli strumenti presenti nello studio.

Grazie al sistema di dosaggio automatico dei singoli attacchi, ogni strumento viene lubrificato con la quantità d'olio realmente necessaria, a seconda del tipo. In questo modo si evita un consumo inutile di olio per la manutenzione, garantendo così le prestazioni ottimali degli strumenti. KaVo QUATTROcare PLUS è universale. Ciò significa che con KaVo QUATTROcare PLUS potete pulire sia i manipoli della KaVo che gli strumenti di tutte le altre marche più note presenti sul mercato.

Manutenzione assolutamente efficiente.

La longevità non è solo legata alla qualità del prodotto ma anche alla frequenza ed alla qualità della manutenzione effettuata. Grazie alla QUATTROcare, KaVo ha imposto un nuovo standard nel settore della manutenzione della strumentazione rotante. L'innovativa KaVo QUATTROcare PLUS non ha rivali in quanto ad efficienza, economicità e semplicità d'utilizzo. Perfetta per tutti gli strumenti utilizzati quotidianamente all'interno dello studio.

KaVo QUATTROcare PLUS è dotata dell'innovativa funzione di spurgo. I condotti di trasmissione e dello spray vengono sottoposti ad un flusso aggiuntivo di aria compressa e ad uno spurgo, in maniera tale da eliminare eventuali residui di olio in eccesso e sottoporre, quindi, gli strumenti KaVo ad una manutenzione perfetta nei minimi dettagli.





OTTIMA.

Programma integrato per la manutenzione del mandrino.

Basta sottoporre ad una pulizia e manutenzione i mandrini dei vostri strumenti una volta a settimana per assicurarne la forza di tenuta, la sicurezza di funzionamento ed una lunga durata

1. Innestare l'adattatore per la manutenzione del mandrino sull'attacco MULTIflex
2. Inserire il mandrino su tale adattatore
3. Premere l'apposito tasto per il relativo programma

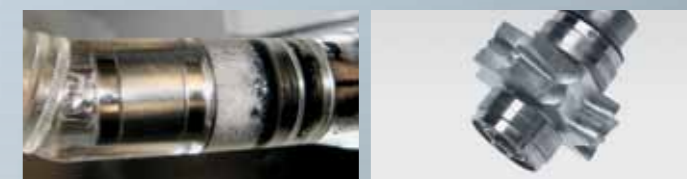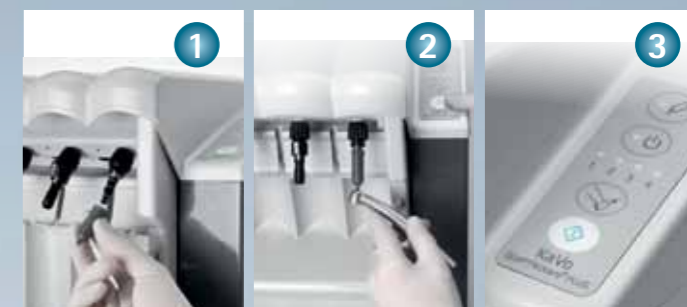

L'effetto KaVo QUATTROcare. La forte espansione dello spray di manutenzione KaVo QUATTROcare PLUS all'interno dello strumento scioglie ed elimina i residui organici.

Efficienza all'interno dello studio. KaVo SUPERtorque LUX 650 B pulita con KaVo QUATTROcare. Sette anni di impiego quotidiano nello studio senza guasti né sostituzione del rotore. Sempre pulita e trattata in modo ottimale - sempre pronta all'uso.

Manutenzione ed efficienza. Punti di forza e vantaggi per voi:

- Manutenzione di massima qualità con il QUATTROcare PLUS spray
- Elevata efficienza, grazie ad una sincronia perfetta con quanto richiesto dal flusso di lavoro quotidiano dello studio

KaVo QUATTROcare PLUS:
manutenzione ottimale - altamente efficiente.



Prezzo d'acquisto sorprendente. Estremamente economica.



I benefici sono evidenti.

Investite in strumenti di qualità elevata? KaVo QUATTROcare PLUS garantisce che la vostra strumentazione conservi precisione e valore. Infatti è possibile risparmiare continuamente ed ottenere risultati ottimali soltanto utilizzando strumenti sottoposti ad una corretta manutenzione.

Il sistema di dosaggio automatico dei singoli attacchi ed il meccanismo di riconoscimento dello strumento offerti da KaVo QUATTROcare PLUS assicurano l'utilizzo dell'esatta dose di spray per la manutenzione. Pertanto si eliminano sprechi e costi aggiuntivi.

Manutenzione economica.

Punti di forza e vantaggi per voi:

- Solo un minuto per un ciclo di pulizia fino a quattro strumenti
- Ciclo automatico, comandato da programma
- Lubrificazione ottimale grazie al sistema di dosaggio automatico per i singoli attacchi
- Semplice gestione che evita errori nella procedura di manutenzione
- Flusso di aria compressa nei condotti di trasmissione e dello spray con la funzione di spurgo
- Nessuna fuoriuscita di residui di lubrificante dagli strumenti dopo la pulizia
- Dotazione di partenza completa, con quattro attacchi (1 x MULTiflex / 3 x INTRAmatic)
- Compatibilità universale (disponibili adattatori per i modelli più comuni presenti sul mercato)
- Design moderno ed ergonomico

KaVo QUATTROcare PLUS:
semplice - universale - economica.

PULIZIA
+
MANUTENZIONE
=



Dati tecnici

Dimensioni:

Larghezza	35 cm
Profondità	28 cm
Altezza	38 cm

Dettagli tecnici:

Peso	10 kg
Tensione di rete	100 – 240 V
Frequenza di rete	50 – 60 Hz
Potenza assorbita	ca. 24 W
Allacciamento aria compressa	4 – 6 bar
Consumo d'aria compressa	ca. 50 NI/min

Requisiti per l'installazione:

- Buona ventilazione dei locali
- Nessuna esposizione diretta ai raggi solari



Accessori

Prodotto	Codice	Prodotto	Codice
Attacco INTRAmatic	0.411.7981	Adattatore per turbine fibrate YOSHIDA	1.000.7403
Attacco MULTIflex	0.411.7991	Adattatore per turbine non fibrate YOSHIDA	1.000.7585
Attacco per testine	0.411.7941	Adattatore per strumenti MIDWEST a bassa velocità	1.000.8459
Attacco COMFORTdrive	1.005.1707	Adattatore per turbine NSK	1.000.8786
Adattatore per strumenti SIRONA TE	1.000.1003	Adattatore per turbine OSADA	1.000.8858
Adattatore per turbine SIRONA T1	1.000.7156	Adattatore per strumenti Borden a 2 vie	1.002.1217
Adattatore per strumenti BIEN-AIR	1.001.7860	QUATTROcare PLUS spray (confezione da 6 bombolette)	1.005.4525
Adattatore per strumenti W&H	1.001.7888		



KaVo. Dental Excellence.